


Ürün Sipariş Bilgileri

çap (mm) uzunluk (mm)	1.50 mm	1.75 mm	2.00 mm	2.25 mm	2.50 mm *	2.75 mm *	3.00 mm *	3.25 mm	3.50 mm *	3.75 mm	4.00 mm *	4.25 mm	4.50 mm	4.75 mm	5.00 mm
8 *	JNC1500-08	JNC1750-08	JNC2000-08	JNC2250-08	JNC2500-08	JNC2750-08	JNC3000-08	JNC3250-08	JNC3500-08	JNC3750-08	JNC4000-08	JNC4250-08	JNC4500-08	JNC4750-08	JNC5000-08
9	JNC1500-09	JNC1750-09	JNC2000-09	JNC2250-09	JNC2500-09	JNC2750-09	JNC3000-09	JNC3250-09	JNC3500-09	JNC3750-09	JNC4000-09	JNC4250-09	JNC4500-09	JNC4750-09	JNC5000-09
10 *	JNC1500-10	JNC1750-10	JNC2000-10	JNC2250-10	JNC2500-10	JNC2750-10	JNC3000-10	JNC3250-10	JNC3500-10	JNC3750-10	JNC4000-10	JNC4250-10	JNC4500-10	JNC4750-10	JNC5000-10
11	JNC1500-11	JNC1750-11	JNC2000-11	JNC2250-11	JNC2500-11	JNC2750-11	JNC3000-11	JNC3250-11	JNC3500-11	JNC3750-11	JNC4000-11	JNC4250-11	JNC4500-11	JNC4750-11	JNC5000-11
12 *	JNC1500-12	JNC1750-12	JNC2000-12	JNC2250-12	JNC2500-12	JNC2750-12	JNC3000-12	JNC3250-12	JNC3500-12	JNC3750-12	JNC4000-12	JNC4250-12	JNC4500-12	JNC4750-12	JNC5000-12
13 *	JNC1500-13	JNC1750-13	JNC2000-13	JNC2250-13	JNC2500-13	JNC2750-13	JNC3000-13	JNC3250-13	JNC3500-13	JNC3750-13	JNC4000-13	JNC4250-13	JNC4500-13	JNC4750-13	JNC5000-13
14	JNC1500-14	JNC1750-14	JNC2000-14	JNC2250-14	JNC2500-14	JNC2750-14	JNC3000-14	JNC3250-14	JNC3500-14	JNC3750-14	JNC4000-14	JNC4250-14	JNC4500-14	JNC4750-14	JNC5000-14
15 *	JNC1500-15	JNC1750-15	JNC2000-15	JNC2250-15	JNC2500-15	JNC2750-15	JNC3000-15	JNC3250-15	JNC3500-15	JNC3750-15	JNC4000-15	JNC4250-15	JNC4500-15	JNC4750-15	JNC5000-15
16	JNC1500-16	JNC1750-16	JNC2000-16	JNC2250-16	JNC2500-16	JNC2750-16	JNC3000-16	JNC3250-16	JNC3500-16	JNC3750-16	JNC4000-16	JNC4250-16	JNC4500-16	JNC4750-16	JNC5000-16
17	JNC1500-17	JNC1750-17	JNC2000-17	JNC2250-17	JNC2500-17	JNC2750-17	JNC3000-17	JNC3250-17	JNC3500-17	JNC3750-17	JNC4000-17	JNC4250-17	JNC4500-17	JNC4750-17	JNC5000-17
18 *	JNC1500-18	JNC1750-18	JNC2000-18	JNC2250-18	JNC2500-18	JNC2750-18	JNC3000-18	JNC3250-18	JNC3500-18	JNC3750-18	JNC4000-18	JNC4250-18	JNC4500-18	JNC4750-18	JNC5000-18
19	JNC1500-19	JNC1750-19	JNC2000-19	JNC2250-19	JNC2500-19	JNC2750-19	JNC3000-19	JNC3250-19	JNC3500-19	JNC3750-19	JNC4000-19	JNC4250-19	JNC4500-19	JNC4750-19	JNC5000-19
20 *	JNC1500-20	JNC1750-20	JNC2000-20	JNC2250-20	JNC2500-20	JNC2750-20	JNC3000-20	JNC3250-20	JNC3500-20	JNC3750-20	JNC4000-20	JNC4250-20	JNC4500-20	JNC4750-20	JNC5000-20
21	JNC1500-21	JNC1750-21	JNC2000-21	JNC2250-21	JNC2500-21	JNC2750-21	JNC3000-21	JNC3250-21	JNC3500-21	JNC3750-21	JNC4000-21	JNC4250-21	JNC4500-21	JNC4750-21	JNC5000-21
22	JNC1500-22	JNC1750-22	JNC2000-22	JNC2250-22	JNC2500-22	JNC2750-22	JNC3000-22	JNC3250-22	JNC3500-22	JNC3750-22	JNC4000-22	JNC4250-22	JNC4500-22	JNC4750-22	JNC5000-22
23	JNC1500-23	JNC1750-23	JNC2000-23	JNC2250-23	JNC2500-23	JNC2750-23	JNC3000-23	JNC3250-23	JNC3500-23	JNC3750-23	JNC4000-23	JNC4250-23	JNC4500-23	JNC4750-23	JNC5000-23
24	JNC1500-24	JNC1750-24	JNC2000-24	JNC2250-24	JNC2500-24	JNC2750-24	JNC3000-24	JNC3250-24	JNC3500-24	JNC3750-24	JNC4000-24	JNC4250-24	JNC4500-24	JNC4750-24	JNC5000-24
25	JNC1500-25	JNC1750-25	JNC2000-25	JNC2250-25	JNC2500-25	JNC2750-25	JNC3000-25	JNC3250-25	JNC3500-25	JNC3750-25	JNC4000-25	JNC4250-25	JNC4500-25	JNC4750-25	JNC5000-25
26	JNC1500-26	JNC1750-26	JNC2000-26	JNC2250-26	JNC2500-26	JNC2750-26	JNC3000-26	JNC3250-26	JNC3500-26	JNC3750-26	JNC4000-26	JNC4250-26	JNC4500-26	JNC4750-26	JNC5000-26
27	JNC1500-27	JNC1750-27	JNC2000-27	JNC2250-27	JNC2500-27	JNC2750-27	JNC3000-27	JNC3250-27	JNC3500-27	JNC3750-27	JNC4000-27	JNC4250-27	JNC4500-27	JNC4750-27	JNC5000-27
28	JNC1500-28	JNC1750-28	JNC2000-28	JNC2250-28	JNC2500-28	JNC2750-28	JNC3000-28	JNC3250-28	JNC3500-28	JNC3750-28	JNC4000-28	JNC4250-28	JNC4500-28	JNC4750-28	JNC5000-28
29	JNC1500-29	JNC1750-29	JNC2000-29	JNC2250-29	JNC2500-29	JNC2750-29	JNC3000-29	JNC3250-29	JNC3500-29	JNC3750-29	JNC4000-29	JNC4250-29	JNC4500-29	JNC4750-29	JNC5000-29
30	JNC1500-30	JNC1750-30	JNC2000-30	JNC2250-30	JNC2500-30	JNC2750-30	JNC3000-30	JNC3250-30	JNC3500-30	JNC3750-30	JNC4000-30	JNC4250-30	JNC4500-30	JNC4750-30	JNC5000-30
31	JNC1500-31	JNC1750-31	JNC2000-31	JNC2250-31	JNC2500-31	JNC2750-31	JNC3000-31	JNC3250-31	JNC3500-31	JNC3750-31	JNC4000-31	JNC4250-31	JNC4500-31	JNC4750-31	JNC5000-31
32	JNC1500-32	JNC1750-32	JNC2000-32	JNC2250-32	JNC2500-32	JNC2750-32	JNC3000-32	JNC3250-32	JNC3500-32	JNC3750-32	JNC4000-32	JNC4250-32	JNC4500-32	JNC4750-32	JNC5000-32
33	JNC1500-33	JNC1750-33	JNC2000-33	JNC2250-33	JNC2500-33	JNC2750-33	JNC3000-33	JNC3250-33	JNC3500-33	JNC3750-33	JNC4000-33	JNC4250-33	JNC4500-33	JNC4750-33	JNC5000-33
34	JNC1500-34	JNC1750-34	JNC2000-34	JNC2250-34	JNC2500-34	JNC2750-34	JNC3000-34	JNC3250-34	JNC3500-34	JNC3750-34	JNC4000-34	JNC4250-34	JNC4500-34	JNC4750-34	JNC5000-34
35	JNC1500-35	JNC1750-35	JNC2000-35	JNC2250-35	JNC2500-35	JNC2750-35	JNC3000-35	JNC3250-35	JNC3500-35	JNC3750-35	JNC4000-35	JNC4250-35	JNC4500-35	JNC4750-35	JNC5000-35
36	JNC1500-36	JNC1750-36	JNC2000-36	JNC2250-36	JNC2500-36	JNC2750-36	JNC3000-36	JNC3250-36	JNC3500-36	JNC3750-36	JNC4000-36	JNC4250-36	JNC4500-36	JNC4750-36	JNC5000-36
37	JNC1500-37	JNC1750-37	JNC2000-37	JNC2250-37	JNC2500-37	JNC2750-37	JNC3000-37	JNC3250-37	JNC3500-37	JNC3750-37	JNC4000-37	JNC4250-37	JNC4500-37	JNC4750-37	JNC5000-37
38	JNC1500-38	JNC1750-38	JNC2000-38	JNC2250-38	JNC2500-38	JNC2750-38	JNC3000-38	JNC3250-38	JNC3500-38	JNC3750-38	JNC4000-38	JNC4250-38	JNC4500-38	JNC4750-38	JNC5000-38
39	JNC1500-39	JNC1750-39	JNC2000-39	JNC2250-39	JNC2500-39	JNC2750-39	JNC3000-39	JNC3250-39	JNC3500-39	JNC3750-39	JNC4000-39	JNC4250-39	JNC4500-39	JNC4750-39	JNC5000-39
40	JNC1500-40	JNC1750-40	JNC2000-40	JNC2250-40	JNC2500-40	JNC2750-40	JNC3000-40	JNC3250-40	JNC3500-40	JNC3750-40	JNC4000-40	JNC4250-40	JNC4500-40	JNC4750-40	JNC5000-40

JADE *NC*

Dilatasyon Sonrası Kateter


Güvenilirliği Hissedin

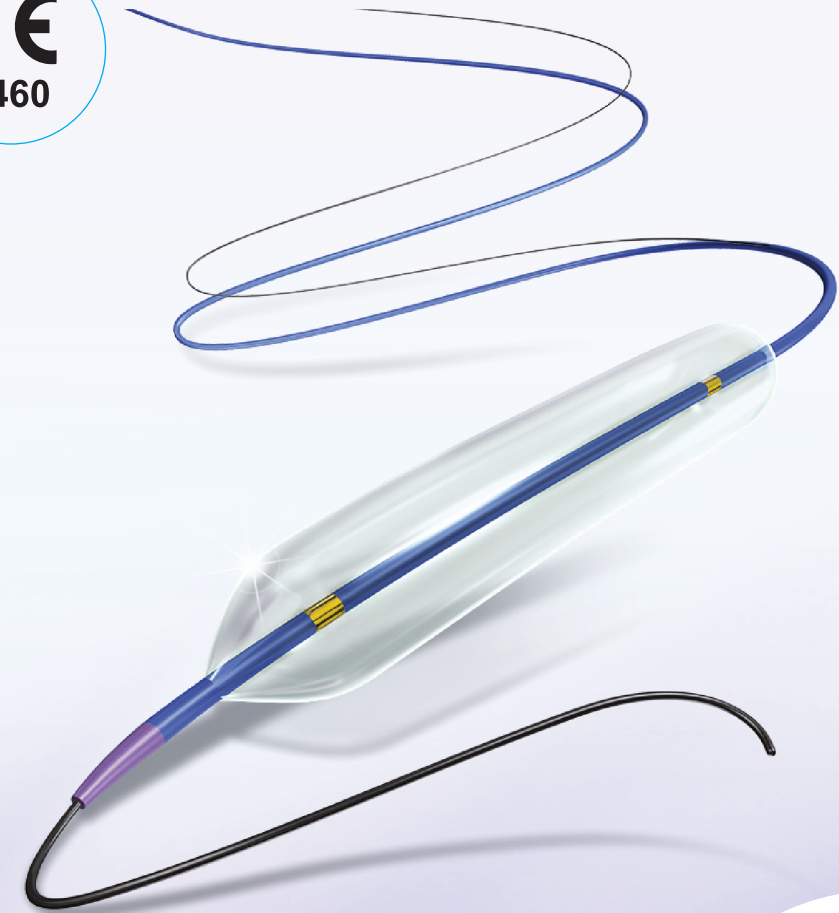

Özellikler



- Stent destekleri ile çarpışmayı önlemek için şık kaplama özel yapım polimer
- Doğrudan tork iletim tasarımı, üstün yönlendirilebilirlik ve kontrol
- İtilebilirlik, izlenebilirlik ve distal bölgede mükemmel progresif esneklik
- Sürtünmesiz performans için ultra pürüzsüz geçiş alanı ve kayganlaştırıcı hidrofilik kaplama
- Ergonomik, şeffaf göbek güvenli bağlantı olanağı sağlar
- 90 ve 100 cm proksimal işaret bantları

- Paralel kılavuz tel çıkış portu en iyi itebilirlik ve daha iyi boya akış enjeksiyonu sağlar
- Daha düşük profil, yeni kaplamalı hipo tüp tasarımı ve daha duyarlı itme ve yönlendirme için özel distal şaft malzemeleri karışımı

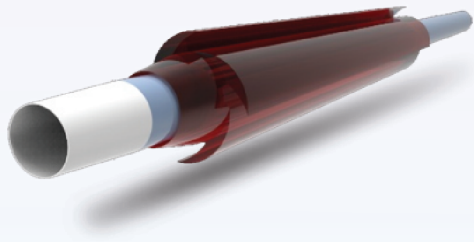


- Bütünlük işaretleyiciler ve küçük şaft çapı, küçük boyutlu kılavuz kateterlerde zıt madde enjeksiyonunu kolaylaştırır
- hızlı inflasyon/deflasyon ve mükemmel yeniden sarma özellikleri
- İndirgenmiş balon profili

2,75 mm karşılaştırmalı uyum tablosu
JADE NC vs predikatif

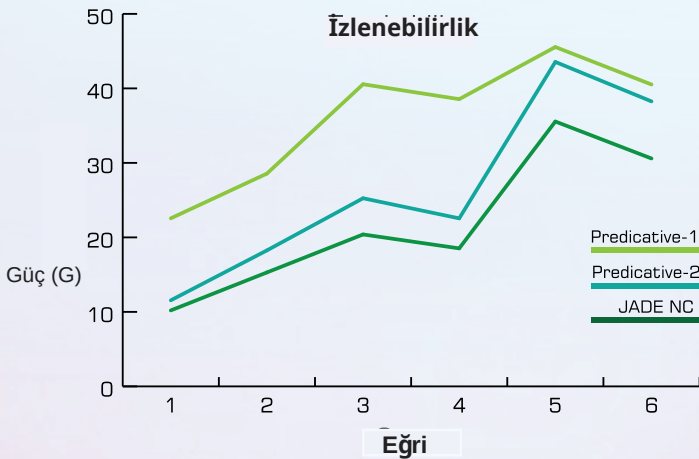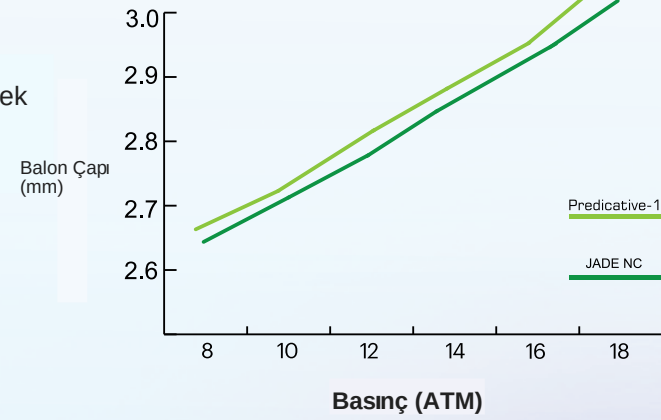


- Tasarımı sayesinde mükemmel, duyarlı izlenebilirlik
- Son derece esnek kateter şaftı, izlenebilirliği en üst noktaya çıkarır

- Odaklı inflasyon gücü
- Stentin damar duvarına doğru kontrollü itilmesi

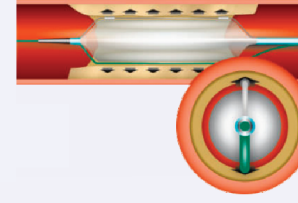

- Son derece esnek uç, balon kateterin tortiyoz anatomilere ulaşmasına yardımcı olur
- Çoklu dilatasyon ihtiyaçlarının üstesinden gelmek için tasarlanmış dirençli, sorunsuz balon

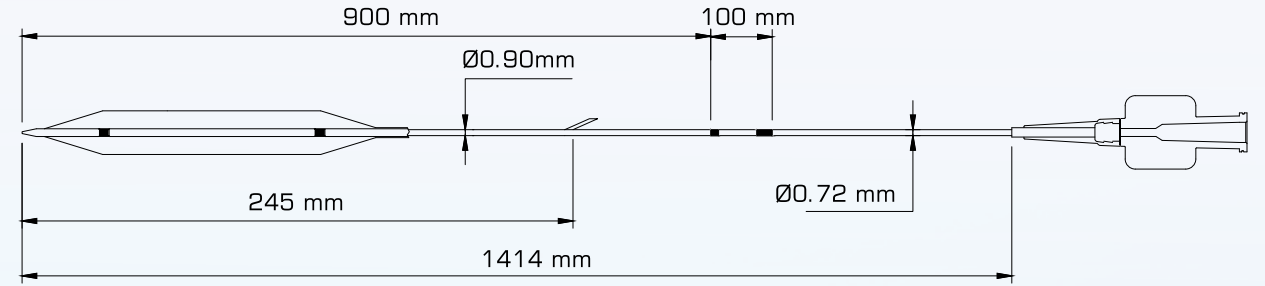

Şişme (ATM)	Boyutuna Göre Balon Çapı(mm)														
	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
6	1.46	1.70	1.94	2.19	2.41	2.68	2.93	3.17	3.41	3.65	3.90	4.15	4.39	4.63	5.38
8	1.48	1.73	1.97	3.45	2.45	2.70	2.96	3.21	3.45	3.70	3.95	4.20	4.44	4.69	5.44
10*	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
12	1.52	1.77	2.03	2.28	2.54	2.79	3.05	3.30	3.55	3.80	4.05	4.30	4.56	4.81	5.07
14	1.55	1.79	2.06	2.32	2.57	2.83	3.10	3.35	3.60	3.85	4.11	4.35	4.62	4.87	5.13
16	1.57	1.82	2.09	2.35	2.61	2.87	3.15	3.40	3.65	3.90	4.16	4.40	4.67	4.93	5.19
18**	1.59	1.85	2.12	2.39	2.65	2.92	3.20	3.45	3.69	3.95	4.20	4.45	4.72	4.99	5.25
20	1.62	1.88	2.16	2.42	2.68	2.97	3.25	3.50	3.73	4.00	4.25	4.50	4.78	5.05	5.31
22	1.65	1.91	2.20	2.45	2.72	3.01	3.29	3.55	3.78	4.05	4.29	4.55	4.83	5.11	5.37

■ Nominal basınç ■ Nominal patlama basıncı)

Teknik Özellikler

Tasarım	Hızlı değişim
Balon uyumluluğu	Uyumsuz
Distal şaft (dışçap)	0.90 mm
Proksimal şaft (dışçap)	0.72 mm
Kullanılabilir kateter uzunluğu	1414 mm
Geçiş profili	0.8 - 1.4 mm
Minimum kılavuz kateter uyumu	0.058" / 5 Fr
Kılavuz tel uyumu	0.014'
Ağırlıklı şişme basıncı	10 ATM
Değerlendirilmiş patlama basıncı	18 ATM
İşaretleyici bantlar	İki platinyum iridyum işaretleyici
Uç profili	0.016"