

## Ürün Sipariş Bilgileri


| çap (mm)<br>uzunluk<br>(mm) | 1.50 mm    | 1.75 mm    | 2.00 mm    | 2.25 mm    | 2.50 mm *  | 2.75 mm *  | 3.00 mm *  | 3.25 mm    | 3.50 mm *  | 3.75 mm    | 4.00 mm *  | 4.25 mm    | 4.50 mm    | 4.75 mm    | 5.00 mm    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 *                         | JNC1500-08 | JNC1750-08 | JNC2000-08 | JNC2250-08 | JNC2500-08 | JNC2750-08 | JNC3000-08 | JNC3250-08 | JNC3500-08 | JNC3750-08 | JNC4000-08 | JNC4250-08 | JNC4500-08 | JNC4750-08 | JNC5000-08 |
| 9                           | JNC1500-09 | JNC1750-09 | JNC2000-09 | JNC2250-09 | JNC2500-09 | JNC2750-09 | JNC3000-09 | JNC3250-09 | JNC3500-09 | JNC3750-09 | JNC4000-09 | JNC4250-09 | JNC4500-09 | JNC4750-09 | JNC5000-09 |
| 10 *                        | JNC1500-10 | JNC1750-10 | JNC2000-10 | JNC2250-10 | JNC2500-10 | JNC2750-10 | JNC3000-10 | JNC3250-10 | JNC3500-10 | JNC3750-10 | JNC4000-10 | JNC4250-10 | JNC4500-10 | JNC4750-10 | JNC5000-10 |
| 11                          | JNC1500-11 | JNC1750-11 | JNC2000-11 | JNC2250-11 | JNC2500-11 | JNC2750-11 | JNC3000-11 | JNC3250-11 | JNC3500-11 | JNC3750-11 | JNC4000-11 | JNC4250-11 | JNC4500-11 | JNC4750-11 | JNC5000-11 |
| 12 *                        | JNC1500-12 | JNC1750-12 | JNC2000-12 | JNC2250-12 | JNC2500-12 | JNC2750-12 | JNC3000-12 | JNC3250-12 | JNC3500-12 | JNC3750-12 | JNC4000-12 | JNC4250-12 | JNC4500-12 | JNC4750-12 | JNC5000-12 |
| 13 *                        | JNC1500-13 | JNC1750-13 | JNC2000-13 | JNC2250-13 | JNC2500-13 | JNC2750-13 | JNC3000-13 | JNC3250-13 | JNC3500-13 | JNC3750-13 | JNC4000-13 | JNC4250-13 | JNC4500-13 | JNC4750-13 | JNC5000-13 |
| 14                          | JNC1500-14 | JNC1750-14 | JNC2000-14 | JNC2250-14 | JNC2500-14 | JNC2750-14 | JNC3000-14 | JNC3250-14 | JNC3500-14 | JNC3750-14 | JNC4000-14 | JNC4250-14 | JNC4500-14 | JNC4750-14 | JNC5000-14 |
| 15 *                        | JNC1500-15 | JNC1750-15 | JNC2000-15 | JNC2250-15 | JNC2500-15 | JNC2750-15 | JNC3000-15 | JNC3250-15 | JNC3500-15 | JNC3750-15 | JNC4000-15 | JNC4250-15 | JNC4500-15 | JNC4750-15 | JNC5000-15 |
| 16                          | JNC1500-16 | JNC1750-16 | JNC2000-16 | JNC2250-16 | JNC2500-16 | JNC2750-16 | JNC3000-16 | JNC3250-16 | JNC3500-16 | JNC3750-16 | JNC4000-16 | JNC4250-16 | JNC4500-16 | JNC4750-16 | JNC5000-16 |
| 17                          | JNC1500-17 | JNC1750-17 | JNC2000-17 | JNC2250-17 | JNC2500-17 | JNC2750-17 | JNC3000-17 | JNC3250-17 | JNC3500-17 | JNC3750-17 | JNC4000-17 | JNC4250-17 | JNC4500-17 | JNC4750-17 | JNC5000-17 |
| 18 *                        | JNC1500-18 | JNC1750-18 | JNC2000-18 | JNC2250-18 | JNC2500-18 | JNC2750-18 | JNC3000-18 | JNC3250-18 | JNC3500-18 | JNC3750-18 | JNC4000-18 | JNC4250-18 | JNC4500-18 | JNC4750-18 | JNC5000-18 |
| 19                          | JNC1500-19 | JNC1750-19 | JNC2000-19 | JNC2250-19 | JNC2500-19 | JNC2750-19 | JNC3000-19 | JNC3250-19 | JNC3500-19 | JNC3750-19 | JNC4000-19 | JNC4250-19 | JNC4500-19 | JNC4750-19 | JNC5000-19 |
| 20 *                        | JNC1500-20 | JNC1750-20 | JNC2000-20 | JNC2250-20 | JNC2500-20 | JNC2750-20 | JNC3000-20 | JNC3250-20 | JNC3500-20 | JNC3750-20 | JNC4000-20 | JNC4250-20 | JNC4500-20 | JNC4750-20 | JNC5000-20 |
| 21                          | JNC1500-21 | JNC1750-21 | JNC2000-21 | JNC2250-21 | JNC2500-21 | JNC2750-21 | JNC3000-21 | JNC3250-21 | JNC3500-21 | JNC3750-21 | JNC4000-21 | JNC4250-21 | JNC4500-21 | JNC4750-21 | JNC5000-21 |
| 22                          | JNC1500-22 | JNC1750-22 | JNC2000-22 | JNC2250-22 | JNC2500-22 | JNC2750-22 | JNC3000-22 | JNC3250-22 | JNC3500-22 | JNC3750-22 | JNC4000-22 | JNC4250-22 | JNC4500-22 | JNC4750-22 | JNC5000-22 |
| 23                          | JNC1500-23 | JNC1750-23 | JNC2000-23 | JNC2250-23 | JNC2500-23 | JNC2750-23 | JNC3000-23 | JNC3250-23 | JNC3500-23 | JNC3750-23 | JNC4000-23 | JNC4250-23 | JNC4500-23 | JNC4750-23 | JNC5000-23 |
| 24                          | JNC1500-24 | JNC1750-24 | JNC2000-24 | JNC2250-24 | JNC2500-24 | JNC2750-24 | JNC3000-24 | JNC3250-24 | JNC3500-24 | JNC3750-24 | JNC4000-24 | JNC4250-24 | JNC4500-24 | JNC4750-24 | JNC5000-24 |
| 25                          | JNC1500-25 | JNC1750-25 | JNC2000-25 | JNC2250-25 | JNC2500-25 | JNC2750-25 | JNC3000-25 | JNC3250-25 | JNC3500-25 | JNC3750-25 | JNC4000-25 | JNC4250-25 | JNC4500-25 | JNC4750-25 | JNC5000-25 |
| 26                          | JNC1500-26 | JNC1750-26 | JNC2000-26 | JNC2250-26 | JNC2500-26 | JNC2750-26 | JNC3000-26 | JNC3250-26 | JNC3500-26 | JNC3750-26 | JNC4000-26 | JNC4250-26 | JNC4500-26 | JNC4750-26 | JNC5000-26 |
| 27                          | JNC1500-27 | JNC1750-27 | JNC2000-27 | JNC2250-27 | JNC2500-27 | JNC2750-27 | JNC3000-27 | JNC3250-27 | JNC3500-27 | JNC3750-27 | JNC4000-27 | JNC4250-27 | JNC4500-27 | JNC4750-27 | JNC5000-27 |
| 28                          | JNC1500-28 | JNC1750-28 | JNC2000-28 | JNC2250-28 | JNC2500-28 | JNC2750-28 | JNC3000-28 | JNC3250-28 | JNC3500-28 | JNC3750-28 | JNC4000-28 | JNC4250-28 | JNC4500-28 | JNC4750-28 | JNC5000-28 |
| 29                          | JNC1500-29 | JNC1750-29 | JNC2000-29 | JNC2250-29 | JNC2500-29 | JNC2750-29 | JNC3000-29 | JNC3250-29 | JNC3500-29 | JNC3750-29 | JNC4000-29 | JNC4250-29 | JNC4500-29 | JNC4750-29 | JNC5000-29 |
| 30                          | JNC1500-30 | JNC1750-30 | JNC2000-30 | JNC2250-30 | JNC2500-30 | JNC2750-30 | JNC3000-30 | JNC3250-30 | JNC3500-30 | JNC3750-30 | JNC4000-30 | JNC4250-30 | JNC4500-30 | JNC4750-30 | JNC5000-30 |
| 31                          | JNC1500-31 | JNC1750-31 | JNC2000-31 | JNC2250-31 | JNC2500-31 | JNC2750-31 | JNC3000-31 | JNC3250-31 | JNC3500-31 | JNC3750-31 | JNC4000-31 | JNC4250-31 | JNC4500-31 | JNC4750-31 | JNC5000-31 |
| 32                          | JNC1500-32 | JNC1750-32 | JNC2000-32 | JNC2250-32 | JNC2500-32 | JNC2750-32 | JNC3000-32 | JNC3250-32 | JNC3500-32 | JNC3750-32 | JNC4000-32 | JNC4250-32 | JNC4500-32 | JNC4750-32 | JNC5000-32 |
| 33                          | JNC1500-33 | JNC1750-33 | JNC2000-33 | JNC2250-33 | JNC2500-33 | JNC2750-33 | JNC3000-33 | JNC3250-33 | JNC3500-33 | JNC3750-33 | JNC4000-33 | JNC4250-33 | JNC4500-33 | JNC4750-33 | JNC5000-33 |
| 34                          | JNC1500-34 | JNC1750-34 | JNC2000-34 | JNC2250-34 | JNC2500-34 | JNC2750-34 | JNC3000-34 | JNC3250-34 | JNC3500-34 | JNC3750-34 | JNC4000-34 | JNC4250-34 | JNC4500-34 | JNC4750-34 | JNC5000-34 |
| 35                          | JNC1500-35 | JNC1750-35 | JNC2000-35 | JNC2250-35 | JNC2500-35 | JNC2750-35 | JNC3000-35 | JNC3250-35 | JNC3500-35 | JNC3750-35 | JNC4000-35 | JNC4250-35 | JNC4500-35 | JNC4750-35 | JNC5000-35 |
| 36                          | JNC1500-36 | JNC1750-36 | JNC2000-36 | JNC2250-36 | JNC2500-36 | JNC2750-36 | JNC3000-36 | JNC3250-36 | JNC3500-36 | JNC3750-36 | JNC4000-36 | JNC4250-36 | JNC4500-36 | JNC4750-36 | JNC5000-36 |
| 37                          | JNC1500-37 | JNC1750-37 | JNC2000-37 | JNC2250-37 | JNC2500-37 | JNC2750-37 | JNC3000-37 | JNC3250-37 | JNC3500-37 | JNC3750-37 | JNC4000-37 | JNC4250-37 | JNC4500-37 | JNC4750-37 | JNC5000-37 |
| 38                          | JNC1500-38 | JNC1750-38 | JNC2000-38 | JNC2250-38 | JNC2500-38 | JNC2750-38 | JNC3000-38 | JNC3250-38 | JNC3500-38 | JNC3750-38 | JNC4000-38 | JNC4250-38 | JNC4500-38 | JNC4750-38 | JNC5000-38 |
| 39                          | JNC1500-39 | JNC1750-39 | JNC2000-39 | JNC2250-39 | JNC2500-39 | JNC2750-39 | JNC3000-39 | JNC3250-39 | JNC3500-39 | JNC3750-39 | JNC4000-39 | JNC4250-39 | JNC4500-39 | JNC4750-39 | JNC5000-39 |
| 40                          | JNC1500-40 | JNC1750-40 | JNC2000-40 | JNC2250-40 | JNC2500-40 | JNC2750-40 | JNC3000-40 | JNC3250-40 | JNC3500-40 | JNC3750-40 | JNC4000-40 | JNC4250-40 | JNC4500-40 | JNC4750-40 | JNC5000-40 |

\* CE Onaylı

# JADE NC

Dilatasyon Sonrası Kateter

Güvenilirliği Hissedin

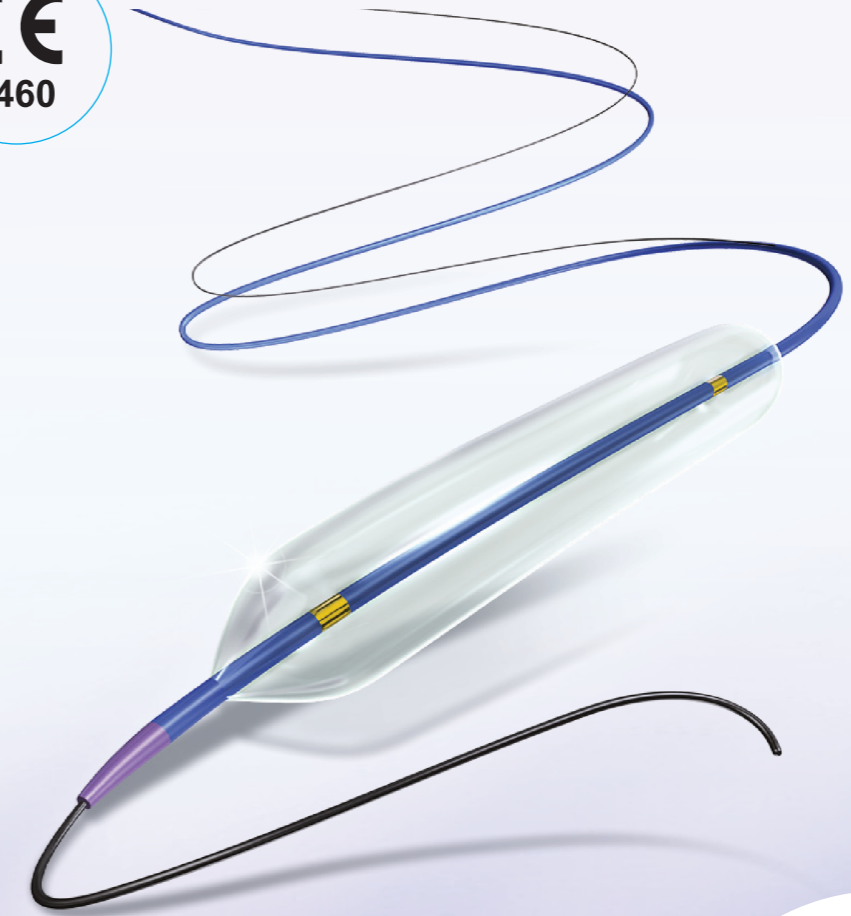


## Özellikler

- Stent destekleri ile çarpışmayı önlemek için şık kaplama özel yapım polimer
- Doğrudan tork iletim tasarımı, üstün yönlendirilebilirlik ve kontrol
- İtilebilirlik, izlenebilirlik ve distal bölgede mükemmel progresif esneklik
- Sürtünmesiz performans için ultra pürüzsüz geçiş alanı ve kayganlaştırıcı hidrofilik kaplama
- Ergonomik, şeffaf göbek güvenli bağlantı olanağı sağlar
- 90 ve 100 cm proksimal işaret bantları



- Paralel kılavuz tel çıkış portu en iyi itilebilirlik ve daha iyi boya akış enjeksiyonu sağlar
- Daha düşük profil, yeni kaplamalı hipo tüp tasarımı ve daha duyarlı itme ve yönlendirme için özel distal şaft malzemeleri karışımı

proksimaldaki kuvvet

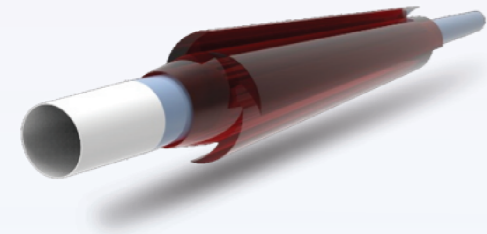


- Bütünleşik işaretleyiciler ve küçük şaft çapı, küçük boyutlu kılavuz kateterlerde zıt madde enjeksiyonunu kolaylaştırır
- hızlı inflasyon/deflasyon ve mükemmel yeniden sarma özellikleri
- İndirgenmiş balon profili

2,75 mm karşılaştırmalı uyum tablosu  
JADE NC vs predikatif

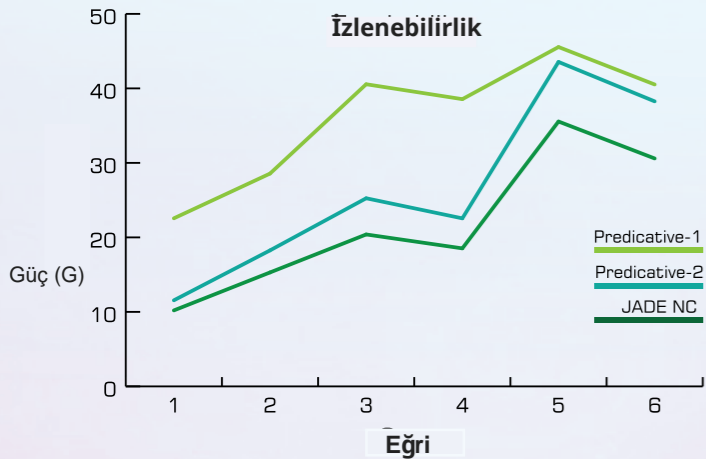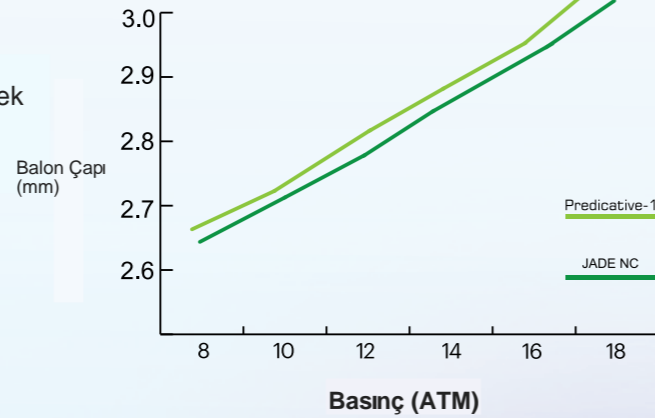


- Tasarımı sayesinde mükemmel, duyarlı izlenebilirlik
- Son derece esnek kateter şaftı, izlenebilirliği en üst noktaya çıkarır

- Odaklı inflasyon gücü
- Stentin damar duvarına doğru kontrollü itilmesi

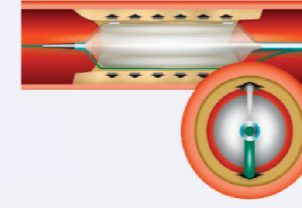

- Son derece esnek uç, balon kateterin tortiyoz anatomilere ulaşmasına yardımcı olur
- Çoklu dilatasyon ihtiyaçlarının üstesinden gelmek için tasarlanmış dirençli, sorunsuz balon

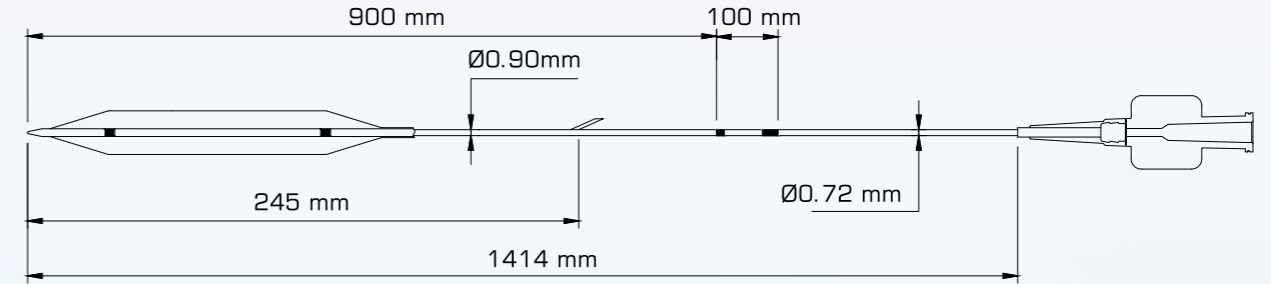

| Şişme (ATM) | Boyutuna Göre Balon Çapı(mm) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|             | 1.50                         | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |  |
| 6           | 1.46                         | 1.70 | 1.94 | 2.19 | 2.41 | 2.68 | 2.93 | 3.17 | 3.41 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.39 | 4.63 | 5.38 |  |
| 8           | 1.48                         | 1.73 | 1.97 | 3.45 | 2.45 | 2.70 | 2.96 | 3.21 | 3.45 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 4.44 | 4.69 | 5.44 |  |
| 10*         | 1.50                         | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |  |
| 12          | 1.52                         | 1.77 | 2.03 | 2.28 | 2.54 | 2.79 | 3.05 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 4.05 | 4.30 | 4.56 | 4.81 | 5.07 |  |
| 14          | 1.55                         | 1.79 | 2.06 | 2.32 | 2.57 | 2.83 | 3.10 | 3.35 | 3.60 | 3.85 | 4.11 | 4.35 | 4.62 | 4.87 | 5.13 |  |
| 16          | 1.57                         | 1.82 | 2.09 | 2.35 | 2.61 | 2.87 | 3.15 | 3.40 | 3.65 | 3.90 | 4.16 | 4.40 | 4.67 | 4.93 | 5.19 |  |
| 18**        | 1.59                         | 1.85 | 2.12 | 2.39 | 2.65 | 2.92 | 3.20 | 3.45 | 3.69 | 3.95 | 4.20 | 4.45 | 4.72 | 4.99 | 5.25 |  |
| 20          | 1.62                         | 1.88 | 2.16 | 2.42 | 2.68 | 2.97 | 3.25 | 3.50 | 3.73 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.78 | 5.05 | 5.31 |  |
| 22          | 1.65                         | 1.91 | 2.20 | 2.45 | 2.72 | 3.01 | 3.29 | 3.55 | 3.78 | 4.05 | 4.29 | 4.55 | 4.83 | 5.11 | 5.37 |  |

■ Nominal basınç ■ Nominal patlama basıncı

## Teknik Özellikler

| Tasarım                          | Hızlı değişim                      |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Balon uyumluluğu                 | Uyumsuz                            |
| Distal şaft (dışçap)             | 0.90 mm                            |
| Proksimal şaft (dışçap)          | 0.72 mm                            |
| Kullanılabilir kateter uzunluğu  | 1414 mm                            |
| Geçiş profili                    | 0.8 - 1.4 mm                       |
| Minimum kılavuz kateter uyumu    | 0.058" / 5 Fr                      |
| Kılavuz tel uyumu                | 0.014"                             |
| Ağırlıklı şişme basıncı          | 10 ATM                             |
| Değerlendirilmiş patlama basıncı | 18 ATM                             |
| İşaretleyici bantlar             | İki platinyum iridyum işaretleyici |
| Uç profili                       | 0.016"                             |